



THUASNE

MOBIDERM

Aktiverar och stimulerar
lymfödem under natten





Ödemdrivande kompressionsteknik för användning under natten

Mobiderm är en unik och patenterad teknik som effektivt motverkar återsvullnad av lymfödem. Detta är kliniskt bevisat*!

Lymfödembehandling består av två faser: Den initiala fasen som strävar efter att reducera lymfödemet så långt det är möjligt och underhållsfasen som syftar till att bibehålla resultatet med hjälp av medicinska kompressionsstrumpor.

Studier visar att behandlingen under dessa båda faser blir mer effektiv och ger bättre resultat i kombination med användning av Mobiderm under natten.*

Mobiderm består av en patenterad teknik med integrerade vadderade kuber som aktiverar lymfsystemet, stimulerar lymfvätskans flöde och motverkar fibros.


Mobiderm finns tillgänglig i flera utföranden. Dels på rulle och ark för applicering i kombination med bandagering under den initiala fasen och dels som arm- och benstrumpor i både standard och MTM (måtttillverkning) för användning i underhållsfasen.

**Mobiderm har deltagit i flera kliniska studier: POLIT study (2014), Marilyn study (2017), Mobinight study (2017). Kontakta oss för mer information.*

- **Mobiderm** är en beprövad och kliniskt testad teknik som ger ett snabbt och varaktigt resultat.
- **Mobiderm** mjukar upp fibros vävnad och stimulerar och aktiverar lymfsystemet.
- **Mobiderm** är enkel att hantera och mycket bekväm att använda.

Egenskaper


- Mobiderm aktiverar och stimulerar lymfvätskan hos brukare med lymfödem, oavsett stadie, under natten.
- Mobiderm är ett komplement till medicinska kompressionsstrumpor.
- Mobiderm används under den initiala reduceringsfasen och i underhållsfasen.

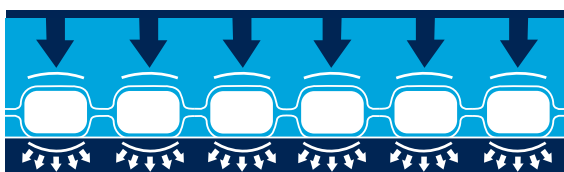

Så fungerar Mobiderm

Kuberna i materialet stimulerar och pressar undan lymfvätskan, vilket aktiverar flödet.

Kliniska studier

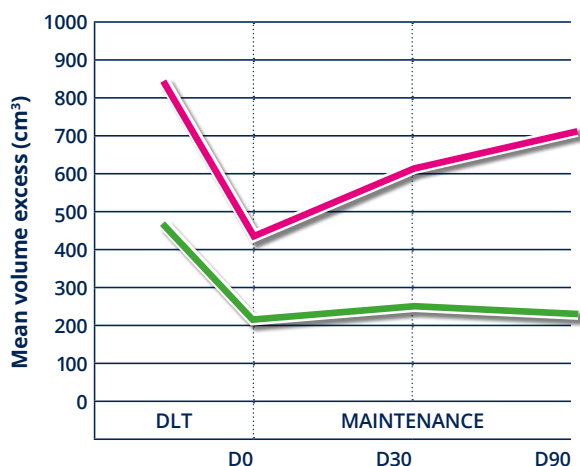

Mobiderm har deltagit i flera kliniska studier. I MARILYN-studien* visades tydligt att lymfödems minskade volym från den initiala reduceringsfasen stabiliserades och bibehölls med användning av Mobiderm Autofit under natten. Utan Mobiderm ökade volymen redan från dag 1 i underhållsfasen. Kontakta oss för mer information!

* 2017, An auto-adjustable night garment to control early rebound effect of edema volume after intensive phase of Decongestive Lymphedema Therapy (DLT). Mestre S.^{1,2}, MD, MSc, Gaillard G.¹, MD, Benhamou M.¹, MD, Soulier-Sotto V.¹, MD, Nou M.¹, MD, Pasqualini M.³, PhD, Ben Amor C.³, MD, Quere I.^{1,2,4}, MD, PhD.

15x15 mm
Används vid större
vävnader som arm och lår.

5x5 mm
Används vid känsliga ytor
som hand och fot.


MOBIDERM autofit

Mobiderm Autofit har justerbar passform i standardstorlek vilket innebär att den passar perfekt i den initiala reduceringsfasen.

Tack vare möjligheten att justera omfånget kan Mobiderm Autofit följa lymfödemets utveckling när det minskar i omfång. Detta gör att Mobiderm Autofit med fördel även kan användas i den initiala reduceringsfasen som alternativ till, och i kombination med, bandagering. De patenterade mjuka kuberna aktiverar lymfsystemet och motverkar risken för stillastående lymfvätska som kan leda till fibros.


Markeringar på materialet möjliggör individuell anpassning av kompressionsnivån i tre steg (+++)
Dessa kan även användas för att kontrollera ödemets variation över tid.

Mobiderm Autofit kan med fördel även användas i underhållsfasen eftersom den i många fall kan ersätta behovet av måttillverkade utföranden. Den justerbara möjligheten innebär också att nivån på den avtagande kompressionen kan regleras helt enligt behov.

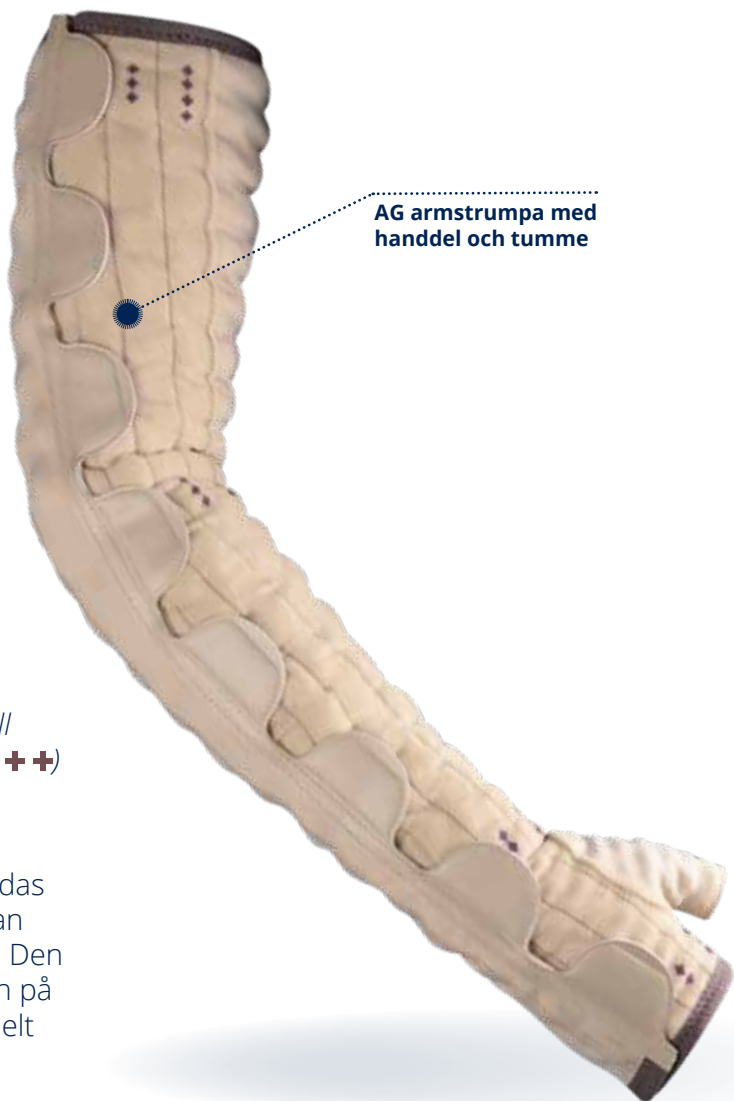

AG armstrumpa med handdel och tumme

Storlek					Längd ℓ	
	Omfång vid cG	Omfång vid cD	Omfång vid cC	Omfång vid cA	Normal ℓ = 40 - 45 cm	Lång ℓ = 45 - 50 cm
AG Armstrumpa – höger					Artikelnr	
1	25 - 32	22 - 28	15 - 19	17 - 21	37330220100261	37330220100271
2	29 - 36	24 - 30	16 - 20	17 - 21	37330220200261	37330220200271
3	33 - 40	26 - 32	17 - 21	18 - 22	37330220300261	37330220300271
4	37 - 44	28 - 34	17 - 21	18 - 22	37330220400261	37330220400271
5	41 - 48	30 - 36	18 - 22	19 - 23	37330220500261	37330220500271
6	45 - 52	31 - 37	19 - 23	20 - 24	37330220600261	37330220600271
AG Armstrumpa – vänster					Artikelnr	
1	25 - 32	22 - 28	15 - 19	17 - 21	37330220100262	37330220100272
2	29 - 36	24 - 30	16 - 20	17 - 21	37330220200262	37330220200272
3	33 - 40	26 - 32	17 - 21	18 - 22	37330220300262	37330220300272
4	37 - 44	28 - 34	17 - 21	18 - 22	37330220400262	37330220400272
5	41 - 48	30 - 36	18 - 22	19 - 23	37330220500262	37330220500272
6	45 - 52	31 - 37	19 - 23	20 - 24	37330220600262	37330220600272

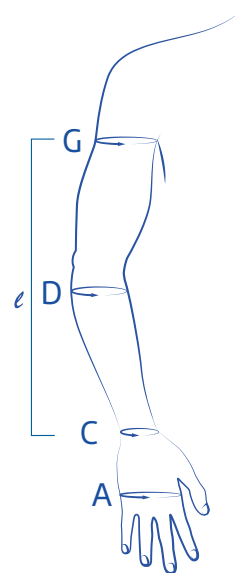

Beställ via vår orderblankett på hemsidan

Standard



Markerade nivåer:
Kompressionen kan justeras helt enligt brukarens behov i takt med att ödemet minskar i omfång.




Antihalk-noppor:
förhindrar fallskador när brukaren är uppe och går.




Integrerad handdel:
Motverkar ödem i handen. Kan vid behov öppnas och frigöra handen.




Öppen design:
Underlättar vid på- och avtagning.

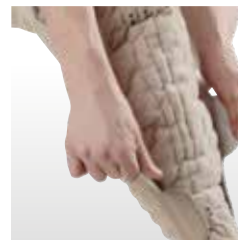

Kardborreförslutning:
Dubbla rader på knä- och lårstrumporna för snabb och enkel på- och avtagning.

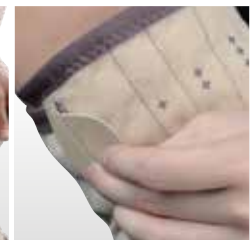

Kardborreförslutning:
Endast en rad på armstrumporna för enkel på- och avtagning med en hand.

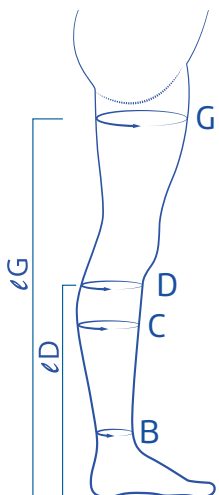


Storlek				Längd			
	Omfång vid cB	Omfång vid cC	Omfång vid cD	Kort ℓD : 38 - 40 cm	Normal ℓD : 40 - 42 cm	Lång ℓD : 42 - 44 cm	Xtra Lång ℓD : 44 - 46 cm
AD Knästrumpa				Artikelnr			
1	16-24	24-35	25-36	37340120100231	37340120100232	37340120100233	37340120100234
2	20-28	32-43	32-43	37340120200231	37340120200232	37340120200233	37340120200234
3	24-32	40-51	39-50	37340120300231	37340120300232	37340120300233	37340120300234
4	28-36	48-59	46-57	37340120400231	37340120400232	37340120400233	37340120400234

Storlek				Längd			
	Omfång vid cB	Omfång vid cC	Omfång vid cG	Kort ℓG : 67 - 72 cm	Normal ℓG : 72 - 77 cm	Lång ℓG : 77 - 82 cm	Xtra Lång ℓG : 82 - 87 cm
AG Lårstrumpa				Artikelnr			
1	16-24	24-35	46-57	37350120100231	37350120100232	37350120100233	37350120100234
2	20-28	32-43	53-65	37350120200231	37350120200232	37350120200233	37350120200234
3	24-32	40-51	61-72	37350120300231	37350120300232	37350120300233	37350120300234
4	28-36	48-59	68-80	37350120400231	37350120400232	37350120400233	37350120400234


MOBIDERM

Mobiderm har en effektivt ödemdrivande funktion och används nattetid. Förutom ett stort antal standardstorlekar erbjuder vi även möjligheten att måttillverka Mobiderm exakt efter brukarens individuella mått.


Studier visar att enbart bruk av medicinska kompressionsstrumpor på dagen inte är tillräckligt för att kontrollera ett lymfödem och att bibehålla resultatet från den initiala reduceringsfasen. Genom att aktivera lymfvätskan även under natten med Mobiderm så stimuleras lymflödet och risken för att det ökar i omfång motverkas effektivt. Det är kliniskt bevisat!

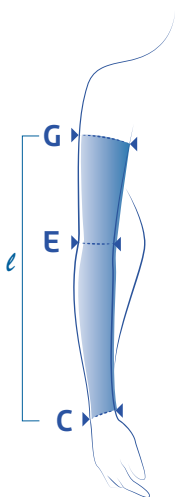

Storlek	Omfång vid cC	Omfång vid cE	Omfång vid cG	Längd	
				Normal ℓ = 40 - 45 cm	Lång ℓ = 45 - 50 cm
Artikelnr					
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29	37300220100233	37300220100232
1+	14 - 16	24 - 27	28 - 32	37300240100233	37300240100232
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33	37300220200233	37300220200232
2+	16 - 18	27 - 30	31 - 35	37300240200233	37300240200232
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36	37300220300233	37300220300232
3+	18 - 20	30 - 33	35 - 39	37300240300233	37300240300232
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39	37300220400233	37300220400232
4+	20 - 22	33 - 36	38 - 42	37300240400233	37300240400232
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42	37300220500233	37300220500232
5+	22 - 24	36 - 39	41 - 45	37300240600233	37300240500232

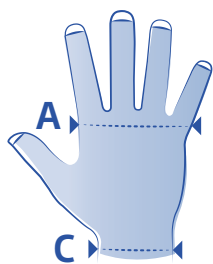

Storlek	Omfång vid cC	Omfång vid cA	Höger hand	Vänster hand
			Artikelnr	
1	14 - 16	15 - 17	37320120100201	37320120100202
2	16 - 18	17 - 19	37320120200201	37320120200202
3	17 - 19	19 - 21	37320120300201	37320120300202
4	19 - 21	21 - 23	37320120400201	37320120400202
5	20 - 22	23 - 25	37320120500201	37320120500202
6	21 - 23	25 - 27	37320120600201	37320120600202

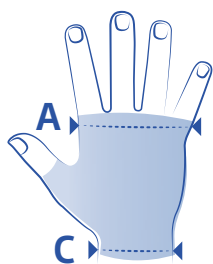

Storlek	Omfång vid cC	Omfång vid cA	Höger / vänster hand
			Artikelnr
1	14 - 16	15 - 17	37310120100299
2	16 - 18	17 - 19	37310120200299
3	17 - 19	19 - 21	37310120300299
4	19 - 21	21 - 23	37310120400299
5	20 - 22	23 - 25	37310120500299
6	21 - 23	25 - 27	37310120600299

Beställ via vår orderblankett på hemsidan

Mobiderm standardstorlekar



AC1 handske


AC1 handdel utan
fingrar


CG armstrumpa

Mobiderm måttillverkade utföranden



CG armstrumpa


AG armstrumpa med
handdel utan tumme


AG armstrumpa med
handdel med tumme


AD knästrumpa



AG lårstrumpa

Mobiderm – övrigt sortiment

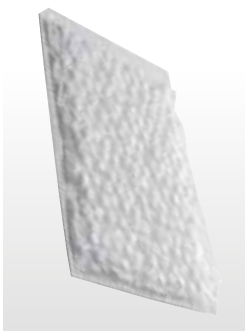

Ark



Rulle

Mobiderm på rulle och ark

Det unika Mobidermmaterialet finns även tillgängligt på ark och rulle för användning i samband med bandagering i den initiala behandlingsfasen.

Ark	25x25 cm	Små kuber: 5x5 mm
Ark	25x100 cm	Små kuber: 5x5 mm
Ark	25x100 cm	Stora kuber: 15x15 mm
Rulle	10x300 cm	Små kuber: 5x5 mm
Rulle	10x300 cm	Stora kuber: 15x15 mm



THUASNE

Thuasne Bégat AB
Box 95, 131 07 Nacka

Tel 08 - 618 74 50
Fax 08 - 640 83 17
e-post info@thuasne.se

www.thuasne.se